

## Congélateur ULT -86 °C

Le congélateur ULT est le premier dans le monde avec un message d'alarme sur mobile et un moniteur d'affichage pour ces différentes fonctions.

Haier ULT est destiné spécialement à la fabrication des congélateurs pour le stockage des produits biologique pour des longues durées par exemple : les virus, les germes, les érythrocytes et les cutis.

Il est destiné pour :

Les instituts de recherche, instituts d'ingénieries biologiques, laboratoires, banques de sang, les hôpitaux et les centres de prévention épidémique



DW-86W420

# Haier

## Congélateur -86°C

Control à base de microprocesseur  
Affichage digital des données  
Intervalle ajustable de température -10°C à -86°C incrementée de 1°C

## Sécurité

Alarmes visuelle et audible de : température haute et basse, défaut de tension, défaut de sonde, défaut du condenseur, température ambiante très élevée, défaut d'alimentation.  
Plusieurs niveaux de sécurité : mot de passe, relai du compresseur, problème de pression  
Compartiments séparés et sécurisés.  
Tous les congélateurs de HAIER sont adaptés d'un logiciel d'affichage et de control de température

## Système de réfrigération

Technologie en cascade de système de réfrigération  
Compresseur danfoss très performant  
Isolation extra large avec haute densité d'isolation de temperature  
Design spécial avec isolation thermique pour éviter le gel  
Système de control par automate pour les températures négatives ainsi protéger les surcharges sur le 2eme compresseur

## Design ergonomique

Affichage LCD pour température du congélateur et ambiante et entrée de tension  
Alarme de seuil de haut et bas de la température  
Plusieurs étages de stockage avec différentes dimensions  
Verrouillage de porte  
Fonctionnement sous température ambiante de 10°C à 32°C  
Fonctionnement intelligent du condensateur pour économie d'énergie  
Commande à distance (optionnel) avec système de compensation d'énergie





## U-COOL (optionnel)

Message d'alarme sur mobile  
Vérification de la température du congélateur par mobile envoyé un message pour ajuster la température du congélateur par mobile



### Options :

Enregistreur de température  
Diagramme circulaire pour 7 jours d'enregistrement  
Sans encre (optionnel)

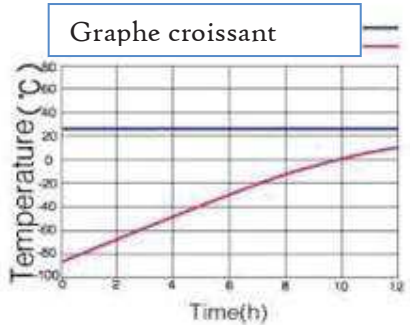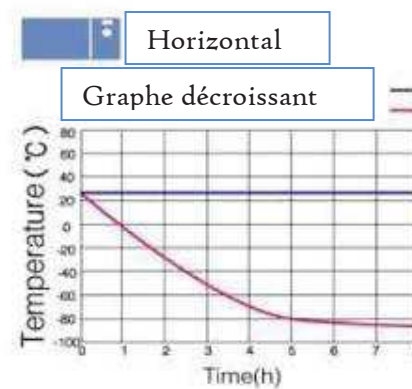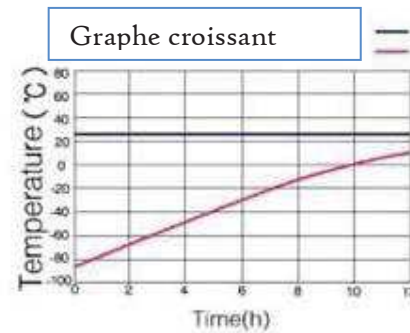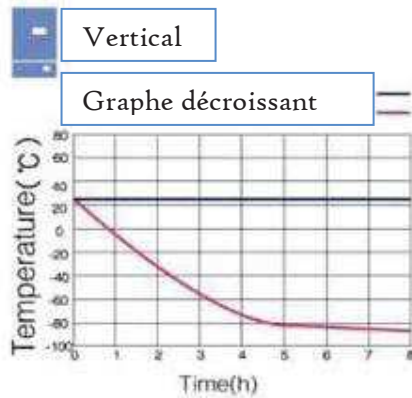

## Spécifications techniques

Modèle N°	DW -86 L 420
volume	420 L
Puissance	¾ HP X2
Plage de température	-40 °c à -86 °c
Température ambiante	10 °c à 32°c
Alimentation	220 v- 240 v /50 Hz -- 115 volt /60 Hz
Control de température	Système à microprocesseur
alarme	Audible et visuelle
Porte	01 avec verrouillage
Compresseur	danfoss
Congélateur	Horizontal
Étages / portes intérieur	-/03
Dim intérieur	1367X 462 X652
Dim extérieur	2130X870X1020
Poids	310Kg
conteneur	12X24X24